

## Attacchi e pilastri a pallina

L'overdenture su impianti rappresenta per molti pazienti una soluzione di trattamento relativamente semplice ed economica. In alcuni casi può essere utilizzata la dentiera già esistente del paziente.

L'offerta dei pilastri a pallina Neoss include: altezze del pilastro da 1 a 6 mm, un analogo del pilastro incluso nella confezione, un comprovato sistema di attacchi a pallina ed un pilastro a pallina a livello di Access. Il sistema è stato progettato per rendere il trattamento più semplice ed il posizionamento più preciso.

Il sistema di attacchi prevede due alternative di materiali, Oro o Titanio.



### Caratteristiche & benefici

**Indicazioni** – Per utilizzo su due impianti nella mandibola e fino a quattro impianti nella mascella, con una divergenza massima tra gli impianti di 10°.


**Ritenzione accurata e predicibile** – La ritenzione inserita nell'alloggiamento in titanio ingaggia l'intera pallina del pilastro, con un "click" al momento dell'accoppiamento.

**Flessibile e semplice** – Sono disponibili vari livelli di ritenzione, facilmente adattabili. Per l'alloggiamento in titanio sono disponibili tre livelli di ritenzione. La ritenzione per l'alloggiamento in Oro può essere facilmente regolata utilizzando gli strumenti per l'attivazione e per la disattivazione.

**Design basso e stretto** – Il design basso e stretto dell'alloggiamento richiede uno spazio minimo e consente la realizzazione di protesi flessibili.

**Angolazione favorevole** – Un'angolazione favorevole può essere un fattore determinante quando si usano gli attacchi. Il Pilastro a pallina per Access fornisce un'eccellente soluzione estetica a questo problema. L'usura può essere minimizzata correggendo l'angolazione degli impianti di 10°, 20° o 30° per un facile posizionamento ed una migliore rimozione della protesi.

**Resistente all'usura** – Il design studiato per situazioni di divergenza e le ampie superfici di ingaggio consentono una maggior resistenza all'usura rispetto ad altri sistemi.

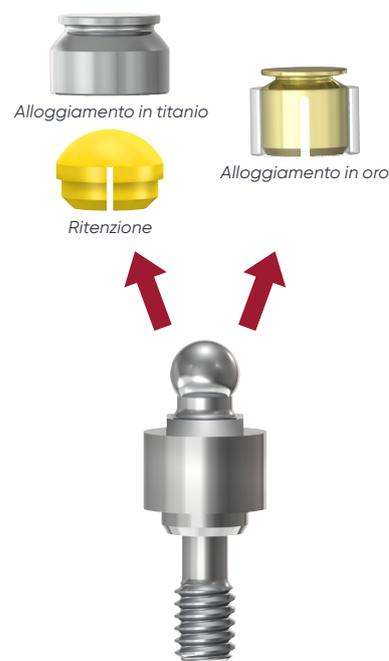

### Assortimento

Articolo	Descrizione
<i>Tutti i pilastri includono l'analogo</i>	
31140	Pilastro a pallina 1.0 mm
31141	Pilastro a pallina 3.0 mm
31142	Pilastro a pallina 4.5 mm
31143	Pilastro a pallina 6.0 mm
31334	Pilastro a pallina per Access 1.0 mm
51124	Cacciavite per pilastro a pallina
90140	Clix – Kit in titanio per attacchi a pallina Include alloggiamento Ti, ritenzioni normale, inferiore, maggiore e mantentore di spazio
90141	Clix – Kit ritenzioni Include due ritenzioni normali, 2 inferiori e due maggiori
90142	Clix – Strumento per l'inserimento
90143	Clix – Alloggiamento in oro per ritenzione Include mantentore di spazio
90144	Clix – Strumento per l'attivazione
90145	Clix – Strumento per la disattivazione

Per informazioni dettagliate si prega di consultare le Linee Guida della Sistematica Implantare Neoss.

Neoss Italia S.r.l · Via Marco Antonio Colonna, 42 · IT-20149 Milano · T +39 02.92952.1 · F +39 02.92952.250 · E [italia@neoss.info](mailto:italia@neoss.info)