

Pilastro Neoss Equator

Le soluzioni overdenture supportate da impianti sono opzioni di trattamento semplici e convenienti per molti pazienti. In alcuni casi può essere utilizzata la protesi esistente del paziente.

Il concetto alla base del sistema Equator è stato utilizzato clinicamente per oltre quindici anni ed offre una metodologia semplice e un posizionamento di precisione. Il Pilastro Neoss Equator è stato progettato per utilizzo con protesi totali o parziali. La funzione auto-allineante permette al paziente di inserire facilmente la propria protesi.

I Pilastri Neoss Equator sono disponibili per gli Impianti Neoss SP (dal Ø3.5 in su), gli Impianti NP (Ø3,25 mm) e per il posizionamento su Pilastri Access.

Caratteristiche e benefici

Design basso e stretto – Un design compatto richiede una minore preparazione della protesi consentendo una maggior accessibilità per protesi totali o parziali ed un aumento della forza in casi con altezza o larghezza compromessa.


Resistente all'usura – Il design sferico offre più libertà, quindi meno usura e una ritenzione affidabile e costante.

Connessione per cacciavite Neoss – Il cacciavite Neo viene utilizzato per prendere, posizionare e stringere il Pilastro Neoss Equator eliminando la necessità di specifici strumenti di inserimento.

Offerta completa – L'offerta del Pilastro Neoss Equator comprende pilastri a livello dell' impianto, incluso l'impianto Neoss NP Ø3.25, al livello del Pilastro Access ed in varie altezze.

Flessibile e facile – Sono disponibili quattro diversi livelli di ritenzione e le cappette di ritenzione vengono facilmente disinserite con gli strumenti inseritore ed estraattore. L'offerta standard consente una divergenza massima tra i pilastri di 28° e la cappetta per la divergenza estesa arriva fino a 50°. Compatibile con i Pilastri angolati Neoss Access, permette una divergenza massima di 60°.

Per informazioni dettagliate consultare le linee guida del Sistema Implantare Neoss.

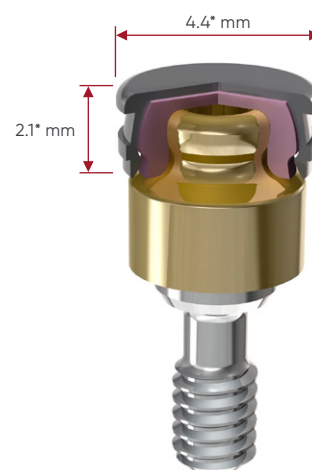

Assortimento

Articolo Descrizione

90201	Neoss Equator Kit Pilastro 1 mm
90202	Neoss Equator Kit Pilastro 2 mm
90203	Neoss Equator Kit Pilastro 3 mm
90204	Neoss Equator Kit Pilastro 4 mm
90205	Neoss Equator Kit Pilastro 5 mm
90206	Neoss Equator Kit Pilastro 6 mm

90207	Equator Kit Pilastro Access 0.5 mm
90208	Equator Kit Pilastro Access 1.5 mm

90242	Neoss Equator Kit Pilastro 2 mm, NP
90243	Neoss Equator Kit Pilastro 3 mm, NP
90244	Neoss Equator Kit Pilastro 4 mm, NP

Ogni Kit include: Pilastro Equator, dischetto protettivo, cappetta e contenitore inox per cappette, cappette di ritenzione standard, forte, soft ed extra soft.

90210	Neoss Equator Kit Capetta e Contenitore Inox di Cappette
90215	Cappetta Neoss Equator e kit di alloggiamento – Divergenza estesa
90211	Neoss Equator Cappetta Bianca: ritenzione standard – 2 pz. (1.8 kg)
90212	Neoss Equator Capetta Viola: ritenzione forte – 2 pz. (2.7 kg)
90213	Neoss Equator Capetta Rosa: ritenzione soft – 2 pz. (1.2 kg)
90214	Neoss Equator Capetta Gialla: ritenzione extra soft – 2 pz. (0.6 kg)
90220	Neoss Equator Transfer da Impronta e Analoghi – 2 set
90222	Neoss Equator Dischetto Protettivo in plastica – 10 pz.
90232	Neoss Equator Strumento per cappette

* 2,2 e 4,8 mm sull'alloggiamento per una divergenza estesa